



Ню Вижън Бутик ЕООД

официален представител на CASADA за България
оторизиран сервиз

гр. София, ул. Иван Багрянов №19
/бул. Г.М. Димитров №65А/
тел: 02/ 962 8686; 962 8049
факс: 02/ 962 8040 www.nvb-bg.com

куатромед 3 QUATTROMED III

< relax in style




Поздравления!

С покупката на QUATTROMED III, Вие доказахте Вашето отговорно съзнание за здравословен начин на живот. За да можете дълго време да се възползвате от предимствата на уреда, Ви молим да прочетете внимателно и да спазвате инструкциите за безопасност и начин на употреба.

Пожелаваме Ви много радостни мигове с Вашият личен QUATTROMED III.

Технически характеристики	3
Медицински указания	3
Гаранционни условия	4
Поддръжка	4
Инструкции за безопасност	5
Дистанционно управление, функции	6-7

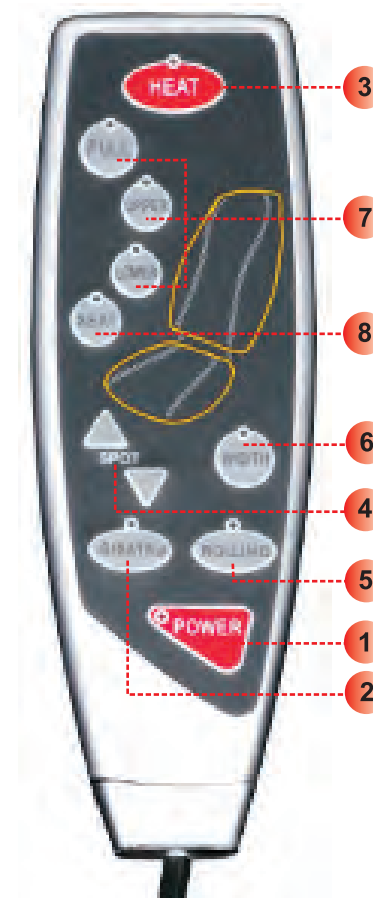

(1) Включване/изключване

При изключване ролките се връщат в изходна позиция

(2) Шиатсу масаж

С този бутон се активира и деактивира шиатсу масаж, който наподобява старата китайска техника на масаж с палци в кръгово движение.

(3) Затопляне

С този бутон се активира и деактивира системата за затопляне (само за областта на гърба) с инфрачервени лъчи.

(4) Позициониране на ролката

С натискане на този бутон можете да изберете позицията на масажните глави.

(5) Ролков масаж

С този бутон се активира и деактивира ролковия масаж.

(6) Разстояние между ролките

Функционира само при ролков масаж.

(7) Област на масажиране

С бутоните FULL, UPPER и LOWER можете да изберете съответно масаж за целия гръб, горната или долната му част.

(8) Вибрации на седалката

Дистанционно управление, функции



При QUATTROMED III масажните глави, които при предишните модели са от пластмаса, са заменени с глави от нефрит, чиито лечебни свойства са познати още от древността. Вградената в уреда система за затопляне с инфрачервена светлина и вибрационният масаж подсилват качествата на нефритените масажни глави и допълнително стимулират работата на лимфната система и кръвообращението.

С QUATTROMED III Вие сте мобилни, защото уредът е добър спътник и когато сте на път.

с
НЕФРИТ



Технически характеристики

Напрежение: AC 230 V, 50 Hz

Мощност: 42 W

Продължителност: 15 мин

Размери: 75 x 46 x 8 cm

Адаптер за автомобил - 12 V



Медицински указания

⚠ ВНИМАНИЕ! Консултирайте се с лекар, ако:

- страдате от остра форма на някаква болест
- имате сърдечно заболяване
- имате хронично заболяване
- използвате пейсмейкър или подобни устройства
- имате остеопороза или лесночупливи кости
- имате злокачествен тумор
- имате увреждане на костите на гръбнака
- имате увреждане на някое от сетивата
- имате някаква степен на инвалидност
- имате проблеми с кръвоснабдяването или треска
- в момента сте подложен/а на някакво лечение
- сте бременна

Бременни, деца и инвалиди не трябва да използват уреда. При следоперативни състояния или наранявания в областта на гръбначния стълб масажът може да бъде вреден. Ако се двоумите, посъветвайте се с лекар.

В случай, че Вашият лекар/ортопед изрично не Ви е забранил масажа на гърба, можете да се наслаждавате на масажа, който предлага QUATTROMED III без притеснения.

Масажирането никога не трябва да се възприема като неприятно. Прекаляването с масажа може да доведе до нежелан ефект.

Гаранционни условия

Търговецът определя предварително колко време важи гаранционния срок. Той започва да тече от датата на закупуване на продукта, която се доказва с документ за покупко-продажба.

Търговецът ще поправи безплатно или замени продукти, при които е възникнала някаква повреда, с изключение на износващи се части, като тапицерията например. За целта е необходимо, повреденият продукт да бъде изпратен до оторизиран от производителя или търговската фирма сервиз заедно с документа за гаранция.

Гаранционните условия отпадат, ако се установи, че е настъпила повреда вследствие на външна намеса или опит за ремонт, който не е осъществен от фирмата-производител или оторизирания сервиз.

Гаранцията включва поправка или замяна на продукта. В рамките на гаранцията производителят/търговецът не поема отговорност за вреди, възникнали по невнимание на клиента, при неспазване на инструкциите за безопасност или при невнимателно ползване на уреда.

Ако след проверка на уреда се установи повреда, която не е включена в гаранцията или че гаранционният срок е изтекъл, ремонтът е за сметка на клиента.

Поддръжка

Разполагате с един продукт, изготвен от висококачествени материали. Това изисква и съответните грижи за него. Избягвайте излагането му на директна слънчева светлина и особено контакт с вода/влага.

Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа. Използвайте суха кърпа. Не използвайте разтворител или други подобни вещества за почистването.

Инструкции за безопасност

Спазването на инструкциите е условие, което гарантира използването на продукта без риск за живота и здравето на потребителя или други хора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Опитите за разглобяване или ремонт на уреда от неоторизирани лица или неквалифициран персонал са абсолютно забранени!

Не използвайте увредени кабели или шнури! В случай на повреда те трябва да се поправят от производителя или сервиза на търговската фирма.

Ако възникнат оплаквания по време на масажа, моля потърсете веднага консултацията на лекар!

За да избегнете токов удар или наранявания, не позволявайте на децата си да използват креслото без Ваш надзор!

Не поставяйте уреда на места с висока температура или наличие на вода/влага!

Избягвайте влаченето на уреда, поставянето или изпускането на тежки и/или остри предмети върху него!

След употреба или когато ще отсъствате дълго време, се уверете, че кабелите са изключени, за да се избегнат злополуки или пожар!

В случай, че уреда спре да функционира безпричинно, веднага го изключете от електрическата мрежа!

Избягвайте допира на кабелите с мокри и влажни ръце!

Не използвайте уреда веднага след хранене, тъй като може да предизвика гадене! Времето за масаж не трябва да превишава предписаните 15 минути, за да не се получи пренатоварване на мускулатурата и нервната система!